



AMÉLIORER L'ACCÈS AUX SOINS
ET ACCÉLÉRER LA PRISE DE
DÉCISION MÉDICALE
PARTOUT ET À TOUT MOMENT.



Uniquement pour un usage de diagnostic *in vitro*
Destiné à l'usage des professionnels médicaux formés.
Tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions.

i-STAT Alinity


ACCESSIBILITÉ

DANS DE NOMBREUX ENVIRONNEMENTS ET LIEUX DE SOINS DIFFÉRENTS

Renforcés par la pandémie, de nouveaux modèles de soins apparaissent pour aider les établissements à relever les défis de l'accès aux soins

Les établissements de soins continuent de rencontrer des difficultés à fournir des soins de qualité face à l'augmentation de la demande, à l'escalade des coûts et aux contraintes financières. Pour satisfaire ces demandes tout en fournissant de soins de qualité, de nombreux établissements de santé ont décentralisé les prestations de soins vers des établissements périphériques afin de favoriser une utilisation plus appropriée des ressources et de servir la population de patients la plus large possible.

Les tests de biologie médicale délocalisée permettent aux cliniciens d'effectuer des tests sanguins de diagnostic au chevet du patient, en fournissant des informations de diagnostic rapides et précises plus près de l'endroit où les soins sont dispensés.

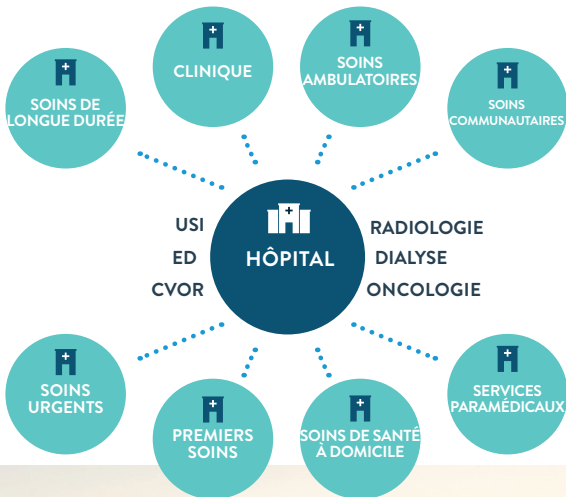

CONNECTIVITÉ


SIMPLIFIE LE PARTAGE DES RÉSULTATS ET ACCÉLÈRE LA PRISE DE DÉCISION EN MATIÈRE DE SOINS

Technologie de connexion avancée

i-STAT Alinity et *Info HQ* permettent une gestion efficace des données du patient par la transmission sans fil ou filaire des données du patient, de l'opérateur et du logiciel aux instruments et des résultats des tests au DME ou au gestionnaire de données.

LES INSTRUMENTS i-STAT ENVOIENT ET REÇOIVENT DES DONNÉES VIA VOTRE RÉSEAU

ENVIRONNEMENT DE CONNECTIVITÉ

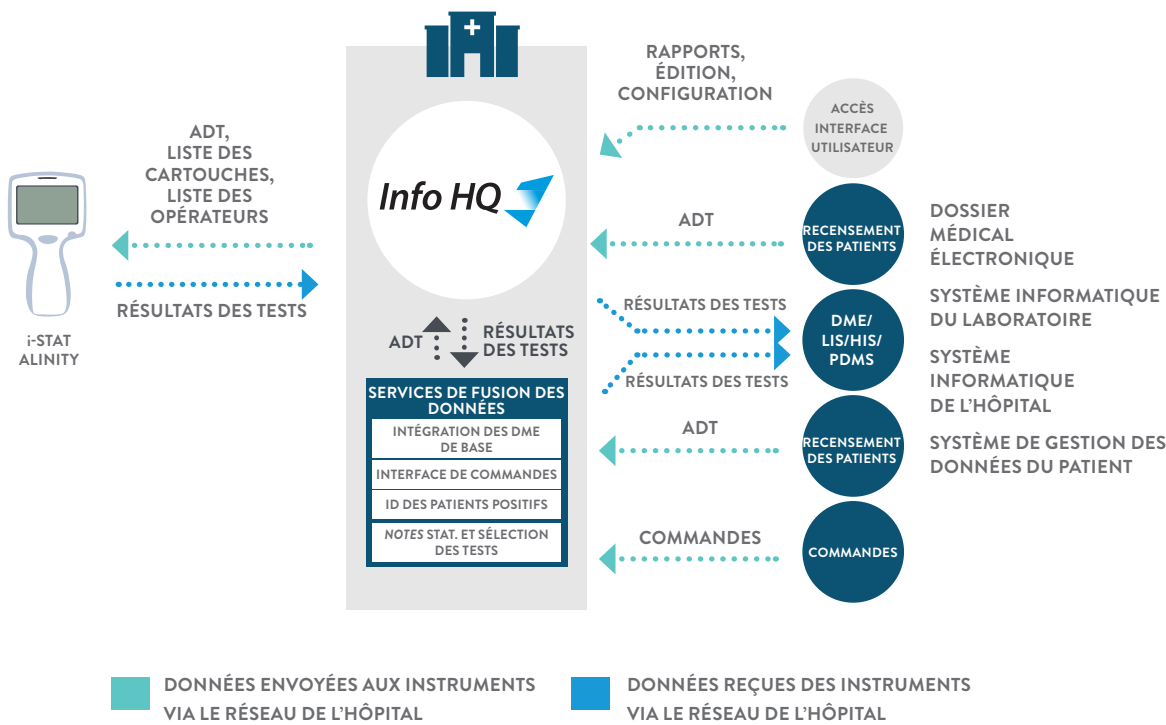

Info HQ est un gestionnaire de données avancé, basé sur le web et conçu pour offrir simplicité, connectivité et contrôle dans le but d'optimiser votre expérience de gestion des données et de transformer les données en décisions.

Les options de configuration peuvent varier. Consultez votre représentant Abbott local.

COMPLET LE MENU DE TESTS PERMET D'ÉVITER DE RECOURIR À PLUSIEURS INSTRUMENTS DE TEST

Un vaste menu de cartouches pour de nombreux environnements cliniques différents

CARTOUCHES	CHIMIE/ÉLECTROLYTES			GAZ DU SANG				COAGULATION	DOSAGE IMMUNOLOGIQUE	
	CHEM8+ (95µL)	G (65µL)	Crea (65µL)	EG7+ (95µL)	CG8+ (95µL)	CG4+ (95µL)	G3+ (95µL)	ACTk (40µL)	TBI (20µL)	
TEMPS D'ANALYSE	~2							~Max 16.7	~15	
TYPE D'ÉCHANTILLON										
TYPE DE TUBE DE PRÉ-LÈVEMENT SANGUIN										
CHIMIE/ÉLECTROLYTES										
SODIUM (Na)	100-180 mmol/L (mEq/L)									
POTASSIUM (K)	2,0-9,0 mmol/L (mEq/L)									
CHLORURE (Cl)	65-140 mmol/L (mEq/L)									
TROU ANIONIQUE ^A	(-10)-(+99) mmol/L (mEq/L)									
CALCIUM IONISÉ (iCa)	0,25-2,50 mmol/L 1,0-10,0 mg/dL									
GLUCOSE (Glu)	1,1-38,9 mmol/L 20-700 mg/dL									
AZOTE URÉIQUE (BUN)	3-140 mg/dL (BUN) 1-50 mmol/L (Urée)									
CRÉATININE (Crea)	0,2-20,0 mg/dL 18-1768 µmol/L									
LACTATE	0,30-20,00 mmol/L 2,7-180,2 mg/dL									
HÉMATOLOGIE										
HÉMATOCRITE (Hct)	15-75 % PCV 0,15-0,75 Fraction									
HÉMOGLOBINE (Hgb) ^A	5,1-25,5 g/dL 51-255 g/L									
GAZ DU SANG										
pH	6,50-8,20									
PCO ₂	5-130 mmHg 0,67-17,33 kPa									
PO ₂	5-800 mmHg 0,7-106,6 kPa									
TCO ₂ ^B	5-50 mmol/L (mEq/L)									
HCO ₃ ^A	1,0-85,0 mmol/L (mEq/L)									
EXCÈS DE BASE (BE) ^A	(-30)-(+30) mmol/L (mEq/L)									
SO ₂ ^A	0-100%									
COAGULATION										
KAOLIN ACT	50-1000 secondes*									
TBI PLASMA										
GFAP	30-10000** pg/mL									
UCH-L1	200-3200 pg/mL									

Sang total artériel Sang total veineux Capillaire Plasma Hépariné EDTA Pas d'anticoagulant, test immédiatement après prélèvement du patient

*La durée de l'analyse dépend de la température de l'échantillon.

** Pour les valeurs de référence, voir le mode d'emploi.

^A Ca²⁺ ionisé

^B Ca²⁺ total



L'i-STAT Alinity portable est suffisamment puissant et polyvalent pour satisfaire toute une gamme de besoins de tests.

*La plage de 77 à 1000 secondes (mode PREWRM) a été vérifiée par des études de comparaison de méthodes.

** Dans de rares circonstances, le résultat quantitatif du dosage de la GFAP peut être signalé comme « > 5574 ». Lorsque ce résultat est affiché, la plage de dosage de la GFAP a été automatiquement tronquée en raison de la détection de la variabilité de la réponse du signal qui pourrait conduire à une sous-estimation de la valeur indiquée. Dans ce cas, une autre cartouche peut être utilisée pour obtenir un résultat quantitatif.

^A Calculé. ^B Le TCO₂ est mesuré sur la cartouche CHEM8+ et calculé sur toutes les autres.

UTILISATION PRÉVUE

Pour l'utilisation prévue et des informations complètes sur le produit, consulter le site globalpointofcare.abbott.

FACILE

LE FONCTIONNEMENT PERMET D'ÉLIMINER LES ERREURS DE L'OPÉRATEUR ET DE SIMPLIFIER SA FORMATION

Des résultats de qualité équivalente au laboratoire en quelques étapes simples



ÉTAPE 1

Déposer quelques gouttes de sang dans la cartouche



ÉTAPE 2

Insérer la cartouche dans l'analyseur



ÉTAPE 3



Afficher les résultats en quelques minutes



ÉTAPE 4

Transmettre les résultats sans fil

Sur l'instrument, des instructions faciles à comprendre, permettent de guider les opérateurs pendant le processus de test.

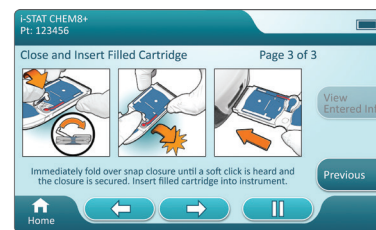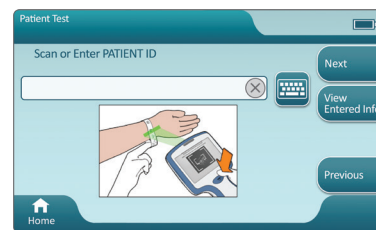

STANDARDISATION

AVEC L'i-STAT LA GESTION DES PROGRAMMES DE BIOLOGIE MÉDICALE DÉLOCALISÉE EST SIMPLIFIÉE PARTOUT

Découvrez les avantages de la standardisation i-STAT



DES RÉSULTATS CONSTANTS AVEC UNE PRÉCISION DE LABORATOIRE

La reproductibilité et la fiabilité permettent des soins aux patients constants et de haute qualité.



UN SYSTÈME SIMPLE ET FACILE À UTILISER

Portable, simple, intuitif ; moins de plateformes à surveiller.



UN LARGE MENU DE TESTS SUR UNE PLATEFORME UNIQUE DE BIOLOGIE MÉDICALE DÉLOCALISÉE

Profitez du menu de tests pour tirer le meilleur parti des tests avec les patients.



UNE FORMATION SIMPLE ET DES COMPÉTENCES DE L'OPÉRATEUR

Des exigences d'accréditation réduites grâce à une documentation minimale.



UNE CAPACITÉ ET UNE CONNECTIVITÉ SANS FIL STANDARDISÉES

Comptez sur un transfert fiable des résultats vers le DME avec une seule plate-forme interfacée.



DES COMMANDES ET UNE GESTION DES STOCKS SIMPLIFIÉES

Augmentez l'efficacité avec un seul appareil et un nombre réduit de références.



UN SERVICE ET UNE ASSISTANCE CONSTANTS ET FIABLES

Réduisez les temps et les coûts d'arrêt de fonctionnement.



DES COÛTS RÉDUITS

La consolidation des appareils réduit le nombre de plateformes interfacées et de contrats de service.

Conçu par vous, pour vous.

• NOTIFICATION DE CERTIFICATION DE L'OPÉRATEUR

Notifie à l'opérateur qu'il doit renouveler sa certification lorsque la date d'expiration de celle-ci approche

• SCÉNARIOS DE FORMATION EN CLASSE PERSONNALISABLES

Facilite des scénarios spécifiques pour la formation en classe

• UNE AIDE PAR DES ILLUSTRATIONS À L'ÉCRAN

Renforce constamment la procédure appropriée pendant l'exécution des tests sur les patients


• PORTABLE : Facile à manipuler

• LÉGER : < 850g avec la batterie

• INTUITIF : Navigation simplifiée

• DURABLE : Fabriqué avec des matériaux résistants

• PROGRAMMABLE : Sélection facile des tests disponibles sur une cartouche et paramétrage des plages personnalisables en fonction du type d'échantillon, de l'âge et du sexe

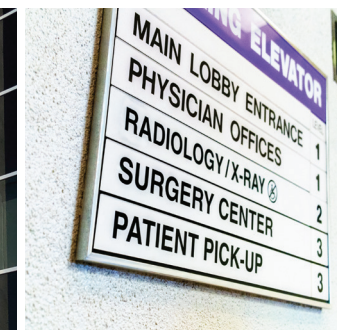

i-STAT Alinity propose un menu de tests cohérent, une utilisation, une gestion des données et des résultats homogènes avec une précision équivalente au laboratoire, dans un large éventail d'établissements de soins.

ASSISTANCE

AIDE À LA MISE EN ŒUVRE ET À LA GESTION DES PROGRAMMES

Assistance lors de la mise en place et l'utilisation en continu

Abbott offre différentes ressources pour aider à l'utilisation du système *i-STAT Alinity* dans votre établissement, comprenant la garantie d'une assistance par des experts chaque fois que nécessaire.



- Un *Guide de référence rapide* est conçu pour différents publics
- Plusieurs *Guides de démarrage* sont rédigés spécialement pour les administrateurs

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE (QRG)*

Un bref aperçu, étape par étape, du processus de test pour les opérateurs d'instruments (box, web)

GUIDES DE DÉMARRAGE (GSG)*

Des guides courts, étape par étape, pour la configuration du système, rédigés pour les administrateurs (box, web)

MANUEL DE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME *

Un document complet et détaillé sur l'ensemble du système (web), la recherche de pannes et le contrôle de la qualité

DES FICHES D'AFFECTATION DES VALEURS POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

VAS - versions téléchargeables et imprimables (web)
eVAS - versions électroniques qui peuvent être transférées vers les instruments (web)

Les ressources d'assistance de l'i-STAT Alinity sont facilement accessibles sur le site Web de Abbott.

*Disponible en plusieurs langues

i-STAT Alinity



- **DES RÉSULTATS AVEC UNE PRÉCISION ÉQUIVALENTE AU LABORATOIRE**—prenez des décisions de traitement en toute confiance.
- **UN VASTE MENU**—testez dans une grande variété d'établissements cliniques.
- **DES RÉSULTATS DE TESTS EN QUELQUES MINUTES**—réduisez les temps d'attente des résultats de laboratoire.
- **FACILE À UTILISER**—portable, simple, utilisation intuitive.

Pour en savoir plus sur l'i-STAT Alinity et sur la manière dont Abbott peut contribuer à améliorer les soins de santé dans votre établissement, consultez le site www.globalpointofcare.abbott, ou contactez votre représentant Abbott.

Uniquement pour un usage de diagnostic *in vitro*.

Pour l'utilisation prévue et des informations complètes sur le produit, consultez le site www.globalpointofcare.abbott.

Tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Ce matériel ne doit être utilisé qu'en dehors des États-Unis. Lire attentivement les instructions figurant dans le (les) manuel(s) d'utilisation du (des) système(s) et sur les étiquettes et/ou dans la (les) notice(s) d'utilisation du (des) réactif(s)

4206.REV3.FRA.FR 02/2023 Mandataire: Emergo - Pays Bas

©2022 Abbott. Tous droits réservés. | i-STAT et Alinity sont des marques déposées d'Abbott.

Abbott Point of Care Inc. | 400 College Road East | Princeton, NJ 08540 USA

(609) 454-9000, (609) 419-9370 (fax) | www.globalpointofcare.abbott

